

MANUAL DE USO MESA DE CAMA BASE EN U



La mesa de cama con base en U está diseñada para ofrecer al usuario el máximo confort a la hora de tomar alimentos. Su diseño pre ensamblado no requiere de herramientas y permite utilizarlo de manera inmediata teniendo en cuenta unas breves indicaciones.

ADVERTENCIA

No usar este producto para ningún otro fin que no sea como ayuda para comer.

EMBALAJE


Deseche el embalaje en su centro de reciclado local.
Deseche el envoltorio y la caja por separado.
Deseche el artículo al final de su vida útil en un punto limpio.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Coloque la palometa en la base de la mesa (1), para enderezar la barra de soporte de la mesa (2). Apriétela hasta que se quede recta y estable.



2. Gire la palometa (4) e inserte el tubo (5) en la carcasa situada debajo de la madera de la mesa (6). Ajuste la altura deseada usando la palometa (3) y gírela (4) para ajustar la inclinación.

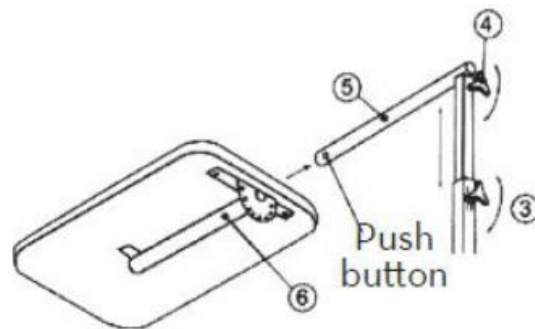

3. La mesa ya está lista para su uso.



USO DE LA MESA

Por favor lea todas las instrucciones de la mesa antes de usarla.

- Verifique antes de usarlo que el producto está estable, rígido y que todos los tornillos están apretados.
- Si el producto está dañado o desgastado, no lo use.
- No almacene el producto a temperaturas extremas (<0 ° -> 40 °).

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Revise con regularidad que las palometas y tonillos están en buen estado.
- Mantenga las ruedas limpias.
- Reemplace las ruedas si sufren algún daño.
- Utilice agua jabonosa y un paño suave para limpiarla. Utilizar paños o productos abrasivos puede provocar rallones.