

CAMILLA-CUCHARA MOLIFT STRETCHER PARA GRÚAS CON ASAS DE ENGANCHE

Ref.: 2150108 Camilla- cuchara Molift Stretcher

Molift camilla-cuchara flexible esta diseñada para distribuir el peso y la presión para un máximo confort al usuario.

Es una camilla flexible para hospitales e instituciones. Está diseñado para transferencias horizontales y cuando el levantamiento del paciente con cincha se considera inapropiado debido a la condición médica del paciente. Es una solución óptima para el traslado de clientes que están en coma o sedados, así como clientes con sospecha de lesiones en la columna y/o fracturas múltiples.


Es Ideal para unidades de emergencia, junto a la percha estándar de 4 puntos de Molift, cuando el tiempo es decisivo y el paciente tiene movilidad limitada.

- Diseño patentado único. El diseño de la pala hace que mover al usuario sea seguro y eficiente en todo momento; desde el ingreso a urgencias, hasta la mesa de rayos X, TC, RMN y quirófano.
- Camilla diseñada para crear la menor sombra posible cuando se emplea en radiografías y tomografías computerizadas. (Para más información ver manual).
- La camilla se puede dividir en dos partes de longitud y, por tanto, es fácil de colocar debajo del cliente.
- Tiene cinco asas a cada lado, lo que proporciona una alternativa de elevación manual desde el suelo y permite la transferencia horizontal y lateral entre camas y superficies.
- Fácil de abrir y bloquear. El sistema de bloqueo especialmente diseñado se abre fácilmente cuando se descarga al usuario y se bloquea completamente cuando se carga al usuario.
- Sin balanceos.
- Incluye juego de asas (4ud – Ref.2150357) para su manejo.
- Material: cuerpo de material plástico compuesto y dispositivos de bloqueo de acero inoxidable.
- Medidas:
 - Largo: 1980 mm
 - Ancho: 630 mm
 - Alto: 126 mm
- Peso de la camilla: 14,5Kg.
- Peso máximo del usuario: 300Kg.
- Ideal para grúas Molift Mover, Molift Partner y las grúas de techo Molift.
- Posibilidad de acoplar juego de cinturones de seguridad (3ud- Ref. 2150355) y un juego de correas con autocierre (4ud- Ref. 2150356)

Karinter

Moving for a better life

- La camilla Molift Stretcher puede limpiarse con un producto de limpieza normal y desinfectarse con un desinfectante normal y un paño. La camilla puede lavarse en lavadoras de uso hospitalario a 80 °C en un programa corto. La camilla debe dejarse enfriar a temperatura ambiente (máx. 30 °C) antes de usarse. También puede limpiarse a alta presión (100 bar) si se hace con cuidado.

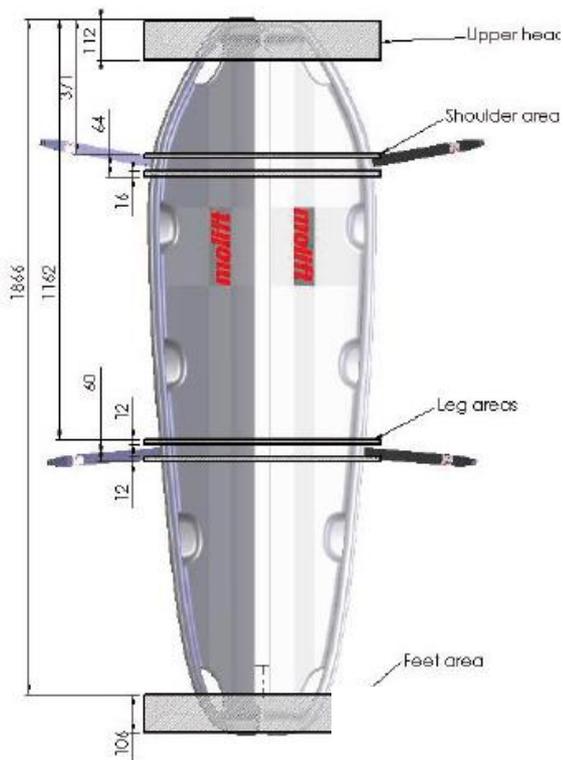

Karinter
Moving for a better life

Karinter.com

C/ Gaià 41, nave 4 08110

Montcada i Reixac (Barcelona)

Tel.: +34 93 221 19 17 · Fax +34 93 221 18 72

info@karinter.com