

## CAMILLA DE TEJIDO MOLIFT PARA GRÚAS

**Ref.: 1721520** Camilla de tejido Molift M

**Ref.: 1721530** Camilla de tejido Molift L

**Ref.: 1721540** Camilla de tejido Molift XL

**Ref.: 214002** – Percha Molift de 8 puntos

Molift RgoSling camilla de tejido esta diseñada para distribuir el peso y la presión para un máximo confort al usuario. La camilla ha sido desarroyada únicamente para su combinación con una percha de 8 puntos.

Se trata de una camilla en poliéster para traslados hacia la posición tumbada, proporciona comodidad y soporte total.

- Ergonomía incorporada para una movilización confortable.
- Camilla de tejido suave para acoplar a grúa.
- Diseñada para transferencias laterales y horizontales.
- Alternativa confortable a la camilla Molift Strecher.
- Ideal cuando la elevación mediante una cincha normal se considere inapropiada debido a las condiciones médicas del paciente, como por ejemplo pacientes sedados o comatosos que requieran una posición recostada estable.
- Incorpora tiras que se sujetan directamente a la percha, con varias posibilidades de ajustar su longitud.
- La cantidad de puntos de anclaje permiten una elevación abierta y estable en posición horizontal.
- Altura en la percha de 8 puntos: 42 cm
- Longitud exterior:
  - Camilla de tejido Mollift talla M: 175cm
  - Percha de 8 puntos: 143cm
- Ancho exterior:
  - Percha de 8 puntos: 92cm
- Material:
  - Camilla de tejido Molift: Poliéster.
  - Percha de 8 puntos: acero
- Carga de trabajo segura: 300Kg 8depende de la carga máxima de trabajo de la grúa cuando esta última es nferior.
- Las cinchas pueden ser lavadas en lavadora hasta 80° y en autoclave hasta 85° durante 30 minutos
- Producto de clase I acuerdo con el MDD 93/42 CEE, Marca CE.
  - ISO 10535 Grúas para el traslado de personas con discapacidad.
  - Requisitos y métodos de ensayo, ISO 14971 Equipos médicos- Analisis de riesgo.

# Karinter


*Moving for a better life*

- Cumple todas las normativas de la CE.
- Disponible en tres tallas.



**Karinter**  
*Moving for a better life*

Karinter.com  
C/ Gaià 41, nave 4 08110  
Montcada i Reixac (Barcelona)  
Tel.: +34 93 221 19 17 · Fax +34 93 221 18 72  
info@karinter.com

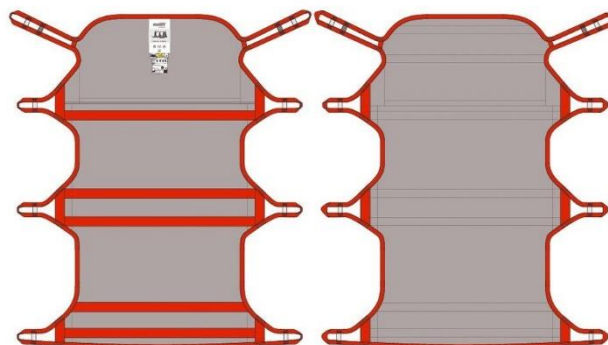

## CAMILLA DE TEJIDO MOLIFT PARA GRÚAS

Guía de medidas

Ref.:	Talla	Guía de medidas
1721520	M	450 x 1750mm
1721530	L	650 x 1780mm
1721540	XL	900 x 1830mm

Para facilitar la colocación de la camilla de tejido debajo del paciente en posición horizontal, se puede utilizar el Etac SlingOn, grande (ref. IM437)

