



Zippie Salsa M2 y Salsa R2

Zippie Salsa M2 y R2



✓ Unidad de asiento que crece con el niño (**multiajustable**)

✓ Disponible con base de tracción **central** (Salsa M2), o tracción **trasera** (Salsa R2)

✓ Disponible toda la gama de **módulos de asiento** de la versión de adultos



✓ **Opciones** pensadas para los niños

Zippie Salsa M2 y R2

✓ Mismas bases y módulos de asiento que en las Salsa de adulto

✓ Asiento para niños



Asiento para
niños



Módulos de
asiento
intercambiables




Base tracción
trasera o central

Zippie Salsa M2



Gracias a su base con tracción Central, la Zippie Salsa M2 ofrece unas **dimensiones muy compactas** para una excelente maniobrabilidad en **interiores**.

Además ofrece un excelente comportamiento en **exteriores**, con una conducción muy suave e intuitiva

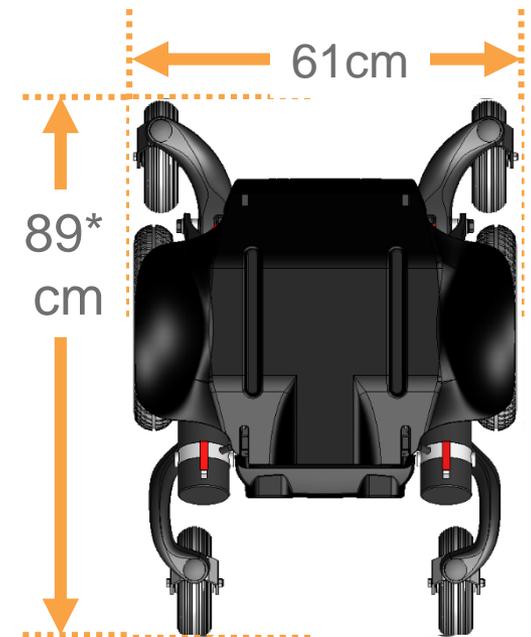

* Sin reposapiés (112 cm con reposapiés)

Zippie Salsa R2

La Zippie Salsa con **tracción trasera** ofrece unas dimensiones y unas alturas de asiento al suelo reducidas, que la hacen idónea para pasar por puertas, maniobrar o acceder a mesas



Anchura total de 60 cm
(ruedas 12,5"), o de 62 cm
(con ruedas 14")




Altura de 41,5 cm

- con ruedas de 12,5"
- Con asiento a 0º
- sin módulos


Asiento Zippie Salsa M2 y R2

- La clave de los múltiples ajustes de la unidad de asiento es su base sólida
- Esta base sólida permite los ajustes de las medidas del asiento, del ángulo de asiento, y la posibilidad de colocar otros asientos

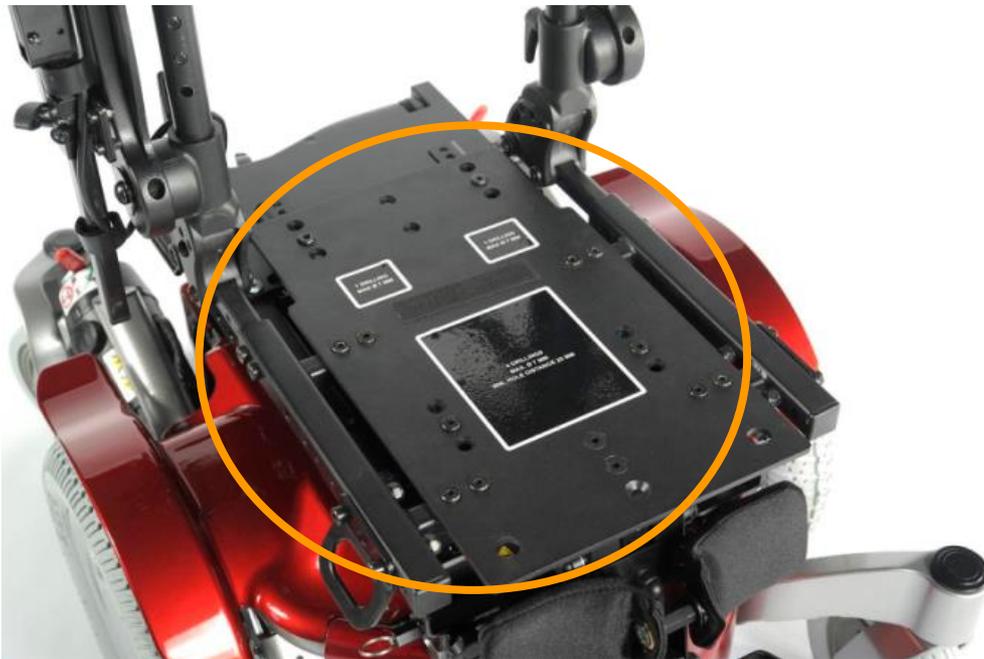


Asiento Zippie Salsa M2 y R2


- Ajustable en anchura y profundidad de 30 a 40cm
- Basculación manual (mediante herramientas), de 0° a 9°
- Respaldo reclinable manual (mediante herramientas) de -4 a 16°
- Regulación en altura de las empuñaduras

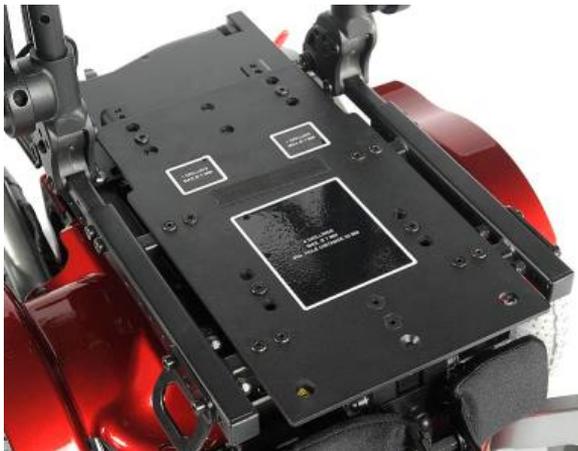

Base sólida ajustable en anchura y profundidad

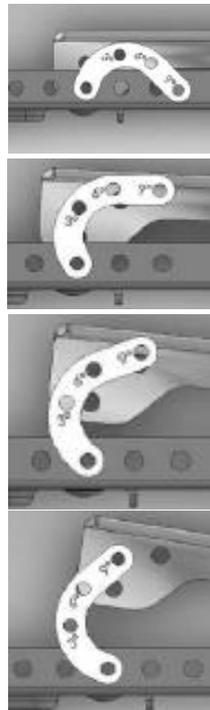

Basculación manual de la base del asiento

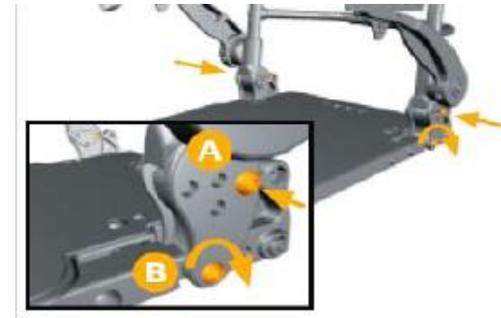


Respaldo reclinable manualmente

Regulación en altura de las empuñaduras



Asiento Zippie Salsa M2 y R2

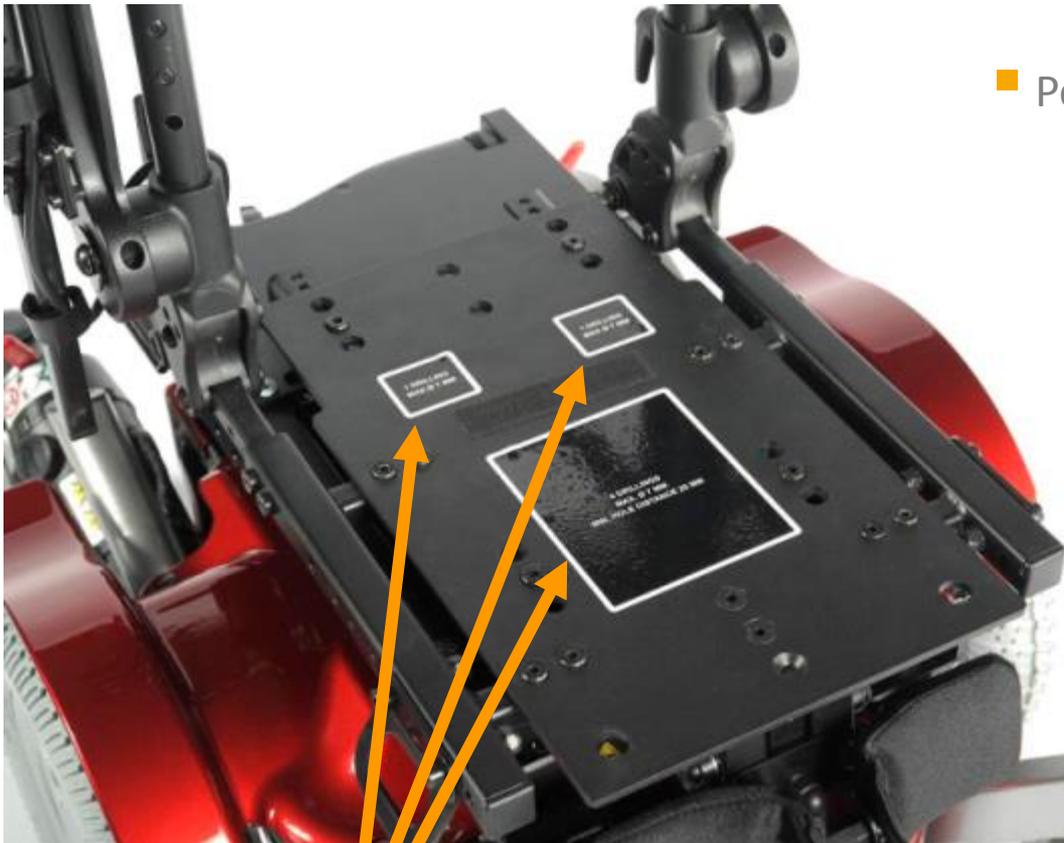

- Peso máximo usuario: 75 kg

- 3 zonas posibles donde taladrar, (claramente identificadas con etiquetas) para los casos en los que fuera necesario colocar otros tipos de asientos

Asiento Zippie Salsa M2 y R2



Standard

- Tapicería de respaldo ajustable en tensión
- Tapicería de respaldo ajustable en altura (38.5, 41 y 43.5cm)
- Cojín de 5 cm grosor



Conjunto Jay Comfort opcional

- Cojín y respaldo Jay Comfort
- Mayor confort y soporte postural
- Para anchuras desde 30 a 40 cm
- Puede llevar soportes laterales opcionales

Asiento Zippie Salsa M2 y R2



Dos tipos de soportes laterales disponibles como opción:

- Rectos, tamaño 10 x 10 cm
- Metidos hacia dentro, tamaño 10 x 10 cm
- Sólo posibles con respaldo Jay Comfort



Funciones de asiento opcionales



Elevación y
basculación eléctrica

- Basculación eléctrica de 0° a 30°
- Basculación eléctrica de -5° a 25°
- Elevación y basculación eléctrica (elevación 30cm, basculación 0° a 30°)
- Respaldo reclinable eléctrico de 0° a 30°



Basculación eléctrica

Reposapiés

Con montaje central

- Plataforma abatible
- Longitud de pierna de 14-36 cm



Abatibles a 90°

- Plataformas de aluminio
- Ajustables en ángulo, profundidad y abatibles
- Longitud de pierna de 16-26 cm
- Posibilidad de tubos de extensión
- Reposapiés elevables manuales (opción)



Reposabrazos



- Abatibles hacia atrás para facilitar las transferencias
- Ajustables en altura
- Ajustables en ángulo
- Almohadillado regulable en profundidad

Baterías

Salsa R2 con tracción trasera

- Baterías de gel de 60 Amph
- Las baterías pueden cambiarse con el niño sentado en la silla, retirando simplemente la carcasa de la parte trasera
 - Fácil y cómodo acceso
 - Opción: Baterías de 70 Amph



Salsa M2 con tracción central

- Baterías de gel de 60 Amph
- Fácil acceso a las baterías, sin herramientas

Otras opciones y accesorios

- Distintos tipos de mandos VR2 y R-Net
- Luces e indicadores
- Sube bordillos
- 6 o 10 km/h
- Mesa abatible
- Espejo retrovisor...etc



Consulta en la hoja de pedido la gama completa de opciones y accesorios disponible para la Zippie Salsa M2 y la Zippie Salsa R2

Colores



■ IMPROVING PEOPLE'S LIVES

Colores

Salsa R2 con tracción trasera

- Rojo
- Azul
- Blanco



Salsa M2 con tracción central

- Rojo
- Azul
- Blanco
- Negro Mate



Certificada para el transporte en vehículos

Las **Zippie Salsa** han superado con éxito todas las pruebas de acuerdo a la normativa ISO-7176-19, lo que las acredita como asiento seguro en un vehículo de transporte





Nota: Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso.

Todas las imágenes, medidas y capacidades aquí mostradas son aproximadas y no constituyen especificaciones