



WHILL

APEX MEDICAL S.L.

Calle Elcano 9, planta 6  
48008, Bilbao, Vizcaya, España  
info@apexmedical.es  
+34 944 70 64 08



REF 743-00001



Vol. 1.0

\*Este dispositivo está destinado a proporcionar movilidad a las personas que tienen dificultades para hacerlo por sí solas.



WHILL

# Muévete más. Vive mejor.

Descubre el mundo con la Model C2 y vive la vida sin obstáculos.

Productos innovadores creados para facilitar la movilidad en tu día a día.

WHILL Model C2





## Práctica

La Model C2 es fácil de manejar y puede realizar giros cerrados, para llevarte donde necesites



La cesta esta ubicada debajo del asiento, permite guardar objetos con mayor facilidad.


Dimensiones: 24 cm x 29 cm x 43 cm



Levanta el reposabrazos para sentarte facilmente desde un lado. Apóyate en el reposapiés para mayor estabilidad.



Explora con la Model C2, puede realizar giros cerrados, lo que le permite llegar donde otros no llegan.

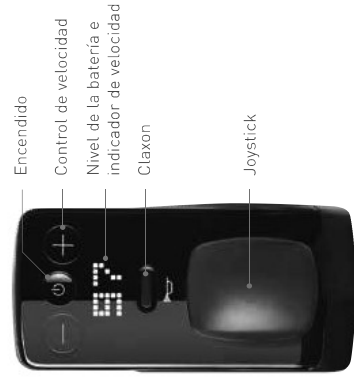


Enciende la silla y ajusta la velocidad con una sola mano. Frenará automáticamente cuando sueltes el joystick, incluso en una pendiente.





## Todoterreno

Descubre su versatilidad: vive la vida que siempre has deseado con la Model C2.  
¡Sal y diviértete!

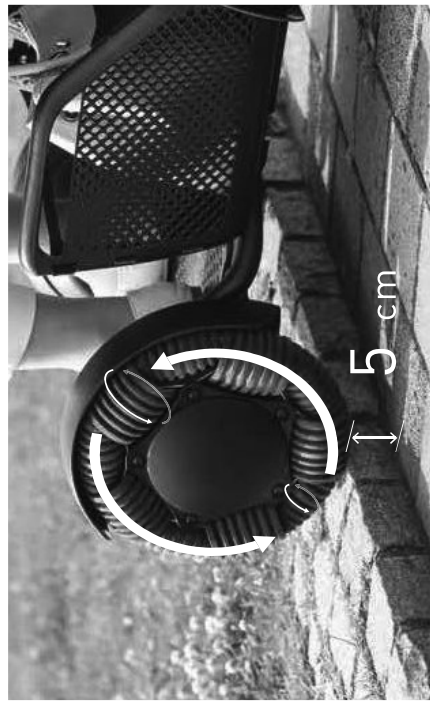

Con sus dos potentes motores y sus grandes ruedas omnidireccionales delanteras, puedes superar sin esfuerzo obstáculos de hasta 5 cm de altura.



La suspensión de las ruedas traseras absorbe las vibraciones del pavimento cuando se conduce.



Fácil de desmontar  
para que quepa en el  
maletero del coche

\*La imagen que se muestra arriba únicamente responde a fines ilustrativos

## Portátil

La Model C2 se puede desmontar para transportarla cómodamente en el maletero de cualquier vehículo. Ya sea estando de compras o de viaje con la familia, la Model C2 te permite vivir la vida al máximo.



Quita la batería.



Tira de la palanca situada debajo del asiento.



Tira del asiento hacia arriba.




Tira de la palanca del lateral de la batería para separar las dos partes del chasis.



## Variedad de colores

Conduce con estilo.

Elige entre 8 colores de carcasa diferentes y personaliza la Model C2 para que se adapte a tu estilo.

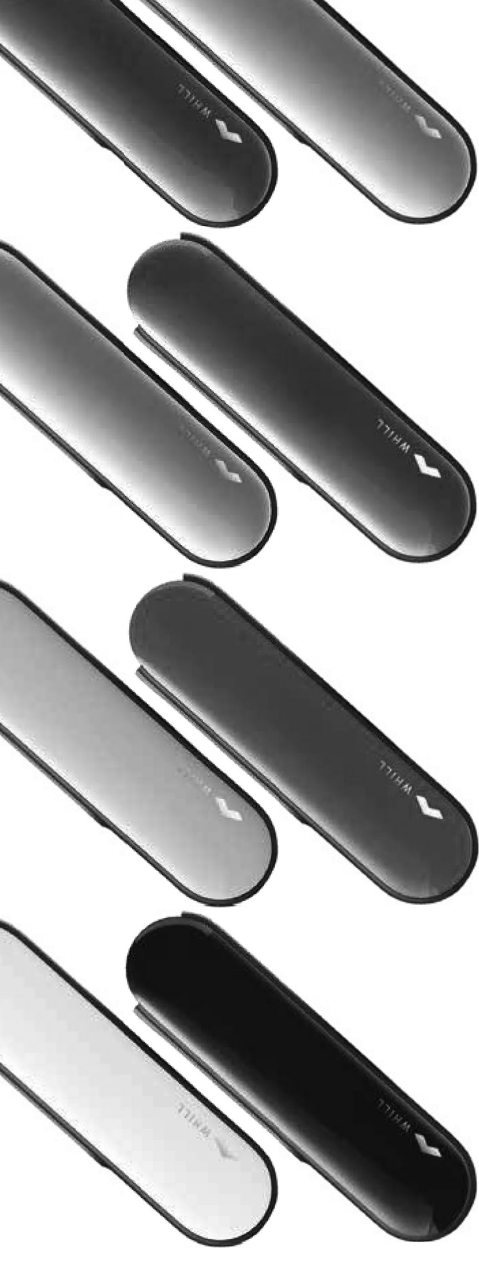

Blanco



Gris\*



Negro



Rojo



Rosa



Dorado



Morado\*



Dorado



Morado\*

# ¡Hemos pensado en todo!

Las opiniones de nuestros clientes nos han ayudado a crear la Model C2. Hemos integrado todas las funciones que necesitabas como el bloqueo remoto y el ajuste de la velocidad máxima para una mayor seguridad.

Luces traseras



Fácil de bloquear


Las luces traseras te hacen visible en cualquier situación, incluso si cuelgas una mochila en el respaldo.

Siéntete seguro conduciendo por la noche

Llave inteligente  
Bloquea el vehículo de forma remota.

\*Accesorio no incluido

Evita deslizamientos

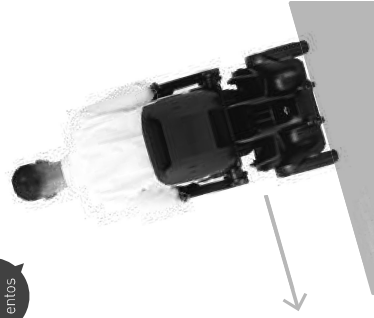

Conduce con seguridad por pendientes.

El joystick puede colocarse al lado izquierdo o derecho.



Batería  
Batería extraíble.

5

horas de carga





2,7 kg

La batería es extraíble y puede cargarse en cualquier lugar.



Todo el control en tu mano.

Aplicación

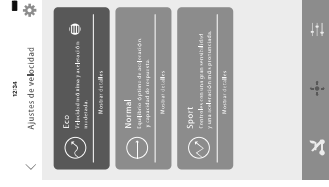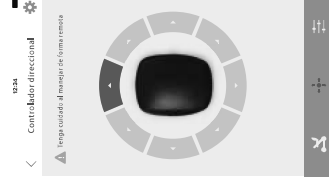



Desde la aplicación y a través de la pantalla del móvil, puedes controlar la silla de forma remota

Verifica el kilometraje total, distancia recorrida, nivel de batería, ciclos de carga completos y más opciones con la aplicación de WHILL\*. También puedes bloquear y desbloquear la silla. \*Debes instalar antes la aplicación.

Establece el modo de conducción a «Eco», «Normal» o «Sport» según tus necesidades.

## Medidas

En la Model C2 pueden ajustarse desde la altura del asiento y el ángulo del respaldo hasta la posición del joystick (a la derecha o izquierda) para crear una experiencia de conducción única.

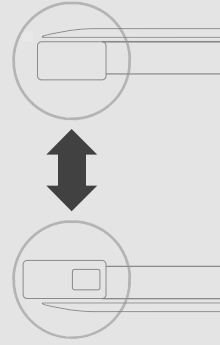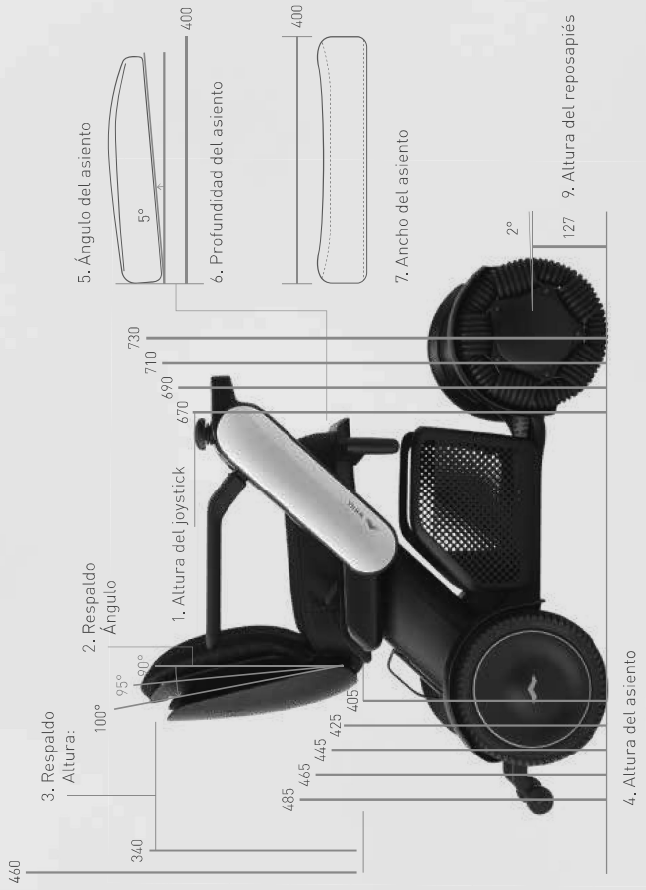

El joystick puede colocarse al lado izquierdo o derecho.

1. Altura del joystick.....670, 690, 710, 730 mm
2. Ángulo de soporte del respaldo.....90, 95, 100°
3. Altura del respaldo.....340 - 460 mm
4. Altura del asiento.....405, 425, 445, 465, 485 mm
5. Ángulo del asiento.....5°
6. Profundidad del asiento.....400 mm
7. Ancho del asiento.....400 mm
8. Ángulo del reposapiés.....2°
9. Altura del reposapiés.....127 mm

Aviso: Cuando uses tu propio cojín, asegurate de usar uno que sea retardante al fuego

## Especificaciones

Velocidad máxima.....	8 km/h	Otras especificaciones	
Motores.....	Dos	Tiempo de carga .....	5 horas
Batería .....	De litio	Batería .....	De litio
			(25,3 V x 10,6 Ah)
Capacidad de inclinación.....	10°	Ciclos de carga de la batería.....	~1.000
Radio de giro .....	760 mm	Batería Wh.....	269 Wh
Superación de obstáculos de.....	50 mm	Temperatura de uso.....	-15 - 40 °C
Sistema de frenado .....	Electromagnético	Medidas de cojines .....	400 mm x 400 mm
Capacidad máxima de peso.....	136 kg		450 mm x 450 mm
Largo total		Luces traseras.....	Luz LED (roja)
(incluido el reposapiés).....	985 mm	Claxon.....	Incorporado, nivel
Ancho total:.....	554 mm		de ruido > 65dB
Alto total: .....	745 - 945 mm	Clase de silla de ruedas.....	A
Medidas del asiento			
Largo:.....	570 mm		
Ancho: .....	550, 600, 650 mm		
Alto: .....	480 mm		
Medias chasis trasero			
Largo:.....	590 mm		
Ancho: .....	554 mm		
Alto: .....	300 mm		
Medidas chasis delantero			
Largo:.....	720 mm		
Ancho: .....	554 mm		
Alto: .....	270 mm		
Tipo de ruedas delanteras: .....	Ruedas omnidireccionales		
Tipo de ruedas traseras: .....	Neumáticas anti-pinchazos		



No utilices la silla como un asiento en un coche o en cualquier otro vehículo.

\*La silla puede transportarse por vía terrestre y aérea.



# Accesorios

Disponibles diferentes accesorios para una mayor personalización



## Carcasas

Puedes cambiar el color de tu Model C2 eligiendo entre los ocho colores disponibles.

Par izquierdo y derecho.



## Cinturón

Estabiliza a la persona en posición sentada incluso en pendientes.



## Cargador de batería

Un magnifico complemento para una batería de repuesto.



## Funda protectora

Protege la Model C2 del polvo y de la suciedad cuando se almacena al aire libre\*.

\*No es resistente al agua. No la utilices para protegerse de la lluvia.



## Porta bastones

Los botones en forma de T, los botones de tipo muleta y las muletas pueden fijarse al chasis.



## Joystick

Fácil manejo con una sola mano.



Muévete más.  
Vive mejor.

